

(fr) Kit d'irrigation pour stomie
Sommaire : Votre produit peut contenir les éléments suivants (voir l'étiquette du produit)
Poche de l'irrigateur avec clamp de régulation Cône pour stomie avec raccord Brosse de nettoyage Clamp pour poche de stomie visible Ceinture de stomie Adapt™ Lubrifiant pour stomie Adapt™ 
Gaine d'irrigation avec système de fermeture par lien torsadé  

Description du produit : Produits facilitant l'irrigation pour colostomie. La gaine d'irrigation est conçue pour être collée à la peau autour de la stomie ou maintenue en place à l'aide d'un anneau et d'une ceinture de stomie afin de faciliter l'acheminement des substances éliminées par la stomie dans les toilettes. L'irrigateur avec cône pour stomie et la tubulure sont utilisés pour faire pénétrer de l'eau dans la stomie. Le clamp peut être utilisé pour faciliter la fermeture de la gaine d'irrigation. La brosse de nettoyage est utilisée lors du rinçage du cône et de la tubulure. Fabriqué à partir de matières plastiques polymères/copolymères, de silicone et peut contenir du métal.

Indications et utilisation prévue : Ces produits sont destinés à être utilisés pour l'irrigation d'une colostomie. L'irrigation est utilisée pour aider à réguler la vidange de l'intestin lorsqu'elle est recommandée par un(e) infirmier(ère) stomathérapeute ou un professionnel de santé.

AVERTISSEMENTS : L'utilisation d'une eau extrêmement chaude peut provoquer des lésions. Les complications peuvent également inclure l'absence de retour de fluide, une syncope vasovagale et des crampes abdominales.

Informations relatives aux produits portant les indications suivantes :

	Non compatible avec l'IRM. La sécurité de ce dispositif a été testée dans un environnement à résonance magnétique. Ce dispositif est étiqueté Non compatible avec l'IRM et ne doit pas être utilisé dans un environnement à résonance magnétique.
--	---

Précautions Le kit d'irrigation n'est pas destiné à être utilisé pour une urostomie ou une iléostomie. Il existe un risque de lésion et/ou d'infection si ces produits sont utilisés pour une urostomie ou une iléostomie.

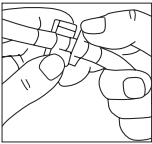
Informations relatives aux produits portant les indications suivantes :

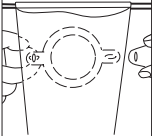
	Utilisation sur un seul patient - plusieurs utilisations. Rincer à l'eau claire et essuyer, si nécessaire. Éliminer lorsque le produit est visiblement endommagé ou coloré. La réutilisation de ce produit sur plusieurs patients est susceptible de causer une infection.
--	--

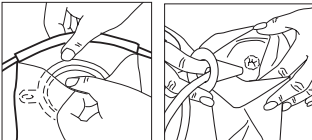
Remarques : L'irrigation peut ne pas être recommandée dans les cas suivants : vous suivez actuellement un traitement par chimiothérapie ou radiothérapie, vous présentez actuellement une sténose stomiale, une hernie parastomiale de grande taille ou un prolapsus stomial, ou vous êtes actuellement atteint de la maladie de Crohn ou de diarrhée. Contactez un(e) infirmier(ère) stomathérapeute ou un professionnel de santé pour savoir si l'irrigation est recommandée dans votre situation et pour obtenir des conseils sur le système de poche pour stomie ou les irritations cutanées. En cas de blessure grave (incident) liée à votre utilisation du produit, contactez votre distributeur ou fabricant local, ainsi que votre autorité compétente locale. Pour davantage d'informations, rendez-vous sur www.hollister.com/authority ou contactez votre représentant CE ou distributeur local.

	Nombre d'unités
	Dispositif médical (le cas échéant).
Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.	
Marquage CE comme exigé	

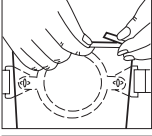
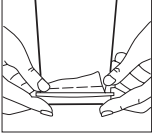
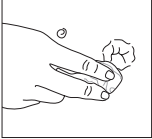
	Nombre d'unités
	Dispositif médical (le cas échéant).

MODE D'EMPLOI :	
Préparation de la poche et du cône de l'irrigateur	
	Raccordez la tubulure du cône pour stomie à la tubulure de la poche de l'irrigateur en les pressant l'une contre l'autre. Assurez-vous que le régulateur de débit est fermé. Remplissez la poche de l'irrigateur avec le volume d'eau tiède indiqué par votre infirmier(ère) stomathérapeute ou votre professionnel de santé et suspendez la poche à hauteur d'épaule. Ouvrez le régulateur de débit pour permettre l'acheminement de l'eau à travers le cône et l'élimination de l'air présent dans la tubulure. Fermez le régulateur de débit.

Fixation de la gaine d'irrigation	
	Pour un système 1 pièce – Fixez la ceinture de stomie sur un côté de la gaine d'irrigation et placez l'ouverture autour de la stomie. Enroulez la ceinture de stomie autour du corps et fixez-la sur l'autre côté de l'anneau en l'ajustant fermement mais confortablement.
	Pour un système 2 pièces – Fixez la gaine d'irrigation à l'anneau de votre protecteur cutané.

Injection d'eau dans la stomie	
	

Asseyez-vous sur les toilettes ou sur une chaise à proximité des toilettes et placez l'extrémité de la gaine de l'irrigateur dans la cuvette des toilettes. Insérez délicatement le cône pour stomie dans la stomie par l'intermédiaire de l'ouverture supérieure de la gaine d'irrigation. Vous pouvez utiliser de l'eau ou un lubrifiant pour stomie pour faciliter l'insertion du cône pour stomie. Ouvrez le clamp situé sur la tubulure pour permettre à l'eau de s'écouler à la vitesse souhaitée. Fermez le clamp une fois qu'un volume d'eau suffisant a pénétré dans votre colon. En cas de crampes abdominales, ralentissez ou cessez temporairement l'écoulement de fluide.

	Retirez le cône de la stomie et fermez la partie supérieure de la gaine d'irrigation en enroulant le système de fermeture vers le bas et en repliant la partie latérale de ce dernier.
	Si vous souhaitez sortir des toilettes, appliquez le clamp pour poche sur la partie inférieure de la gaine d'irrigation. Attendez que le colon se vide. En général, cela dure 30 à 45 minutes, mais cette durée peut dépendre de la fréquence d'irrigation.
	

Videz la poche d'irrigation. Retirez la gaine d'irrigation et nettoyez la zone située autour de votre stomie et de la peau péristomiale, puis séchez-la en tapotant avant d'appliquer un nouveau système de poche. Remarque : Vous devez appliquer une poche au cas où la stomie fonctionnerait entre deux irrigations tant que l'irrigation de la colostomie n'est pas réglée correctement. Une fois le régime d'irrigation établi, vous pouvez porter un mini-bouchon pour stomie (non inclus). Déconnectez toutes les pièces du système d'irrigation et rincez-les à l'eau. La brosse ne doit être utilisée que sur le cône.

Mise au rebut (Veuillez respecter toutes les réglementations locales relatives à la mise au rebut)
NE PAS JETER DANS LES TOILETTES

(fr-CA) Trousse d'irrigation de stomie
Contenu : Votre produit peut comprendre les articles suivants (voir l'étiquette du produit)
Sac d'irrigation avec régulateur de débit (clampe) Cône pour stomie avec raccord Brosse de nettoyage Clampe pour sac de stomie visible Ceinture de stomie Adapt™ Lubrifiant pour stomie Adapt™ 
Drain irrigateur avec ligature  

Description du produit : Produits pour favoriser l'irrigation d'une colostomie. Le drain irrigateur est conçu pour être collé à la peau entourant la stomie ou maintenu en place avec une collerette et une ceinture de stomie pour aider à diriger l'écoulement de la stomie dans une toilette. Le sac d'irrigation, le cône pour stomie et le tube servent à faire circuler de l'eau dans la stomie. La clamppe peut être utilisée pour aider à fermer le drain irrigateur. La brosse de nettoyage peut être utilisée lors du rinçage du cône et du tube. Fabriqués à partir de matières plastiques polymères et copolymères et de silicone, e peuvent contenir du métal.

Indications et usage prévu : Ces produits sont destinés à être utilisés pour l'irrigation d'une colostomie. Lorsqu'elle est recommandée par une infirmière spécialisée en soins de stomie ou un professionnel de la santé, l'irrigation est utilisée pour aider à réguler la vidange de l'intestin.

MISES EN GARDE : L'utilisation d'eau extrêmement chaude peut causer des blessures. Les complications peuvent aussi comprendre le non-retour du liquide, une réaction vasovagale et des crampes abdominales.

Pour les produits désignés comme :

	Non compatible avec la RM. Ce dispositif a fait l'objet de tests pour déterminer si son utilisation est sécuritaire dans un contexte d'imagerie par résonance magnétique (RM). Ce dispositif est désigné comme étant non compatible avec la RM et ne doit pas être utilisé dans un contexte d'imagerie par RM.
---	--

Précautions La trousse d'irrigation n'est pas destinée à être utilisée avec une urostomie ou une iléostomie. Une blessure et/ou une infection peuvent se produire si les produits sont utilisés avec une urostomie ou une iléostomie.

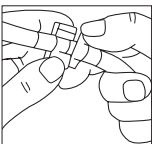
Pour les produits désignés comme :

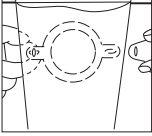
	Un seul patient - utilisation multiple. Rincer à l'eau propre et essuyer pour le sécher, au besoin. Jeter lorsqu'il est visiblement endommagé ou taché. Partager le produit avec plusieurs utilisateurs crée un risque d'infection.
---	---

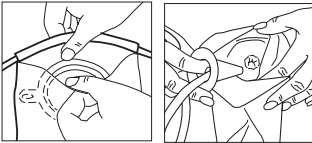
Remarques : L'irrigation peut ne pas être recommandée si vous suivez l'un des traitements suivants ou si vous présentez l'une des affections suivantes : chimiothérapie en cours, radiothérapie, sténose de la stomie, hernie péristomiale importante, prolapsus de la stomie, maladie de Crohn ou diarrhée. Parlez à une infirmière spécialisée en soins de stomie ou à un professionnel de la santé pour déterminer si l'irrigation peut vous convenir, et pour obtenir de l'aide au sujet de l'appareillage de stomie ou en présence d'une irritation cutanée. En cas de blessure grave (incident) liée à l'utilisation du produit, veuillez communiquer avec le fabricant, votre distributeur local ou votre autorité locale compétente. Pour en savoir plus, consultez la page www.hollister.com/authority ou communiquez avec le représentant de la CE ou le distributeur local.

	Nombre d'unités
	Dispositif médical (s'il y a lieu).
Fabriqu� sans latex � base caoutchouc naturel.	
Marquage CE tel que requis	

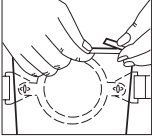
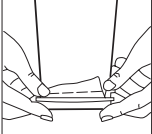
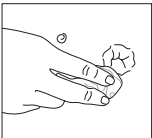
	Nombre d'unit�s
	Dispositif m�dical (s'il y a lieu).

MODE D'EMPLOI :	
Pr�parer le sac d'irrigation et le c�ne	
	Raccorder le tube du c�ne pour stomie au tube du sac d'irrigation en les poussant l'un contre l'autre. S'assurer que le r�gulateur de d�bit est ferm�. Ajouter la quantit� d'eau ti�de indiqu�e par votre infirm�re sp�cialis�e en soins de stomie ou votre professionnel de la sant� dans le sac d'irrigation et accrocher le sac � la hauteur des �paules. Ouvrir le r�gulateur de d�bit pour permettre � l'eau de passer par le c�ne afin d'�vacuer l'air du tube. Fermer le r�gulateur de d�bit.

Fixer le drain irrigateur	
	Pour un syst�me 1 pi�ce – Fixer la ceinture de stomie � un c�t� du drain irrigateur et placer l'ouverture autour de la stomie. Faire passer la ceinture de stomie autour du corps et la fixer � l'autre c�t� de la collerette en s'assurant qu'elle est bien ajust�e.
	Pour un syst�me 2 pi�ces – Fixer le drain irrigateur � la collerette de votre champ protecteur.

Faire entrer de l'eau dans la stomie	
	

S'asseoir sur la toilette ou sur une chaise plac e   c t  de la toilette et placer le bout du drain irrigateur dans la cuvette de toilette. Ins rer doucement le c ne pour stomie dans la stomie par l'ouverture sup rieure du drain irrigateur. L'insertion du c ne pour stomie peut  tre facilit e   l'aide d'eau ou d'un lubrifiant pour stomie. Ouvrir la clamppe sur le tube pour permettre   l'eau de s' couler   la vitesse voulue. Fermer la clamppe lorsqu'une quantit  suffisante d'eau est entr e dans le colon. En cas de crampes abdominales, ralentir ou arr ter temporairement le d bit de liquide.

	Retirer le c�ne de la stomie et fermer le dessus du drain irrigateur en roulant la ligature vers le bas et en pliant le c�t� de la ligature.
	Fixer la clamppe pour sac au bas du drain irrigateur si vous souhaitez vous �loigner de la toilette. Attendre que le colon se vide. Ce processus prend habituellement de 30 � 45 minutes, mais la dur�e d�pend de la fr�quence d'irrigation.
	

Vider le sac d'irrigation. Retirer le drain irrigateur. Nettoyer autour de votre stomie et la peau p ristomiale. S cher en tapotant avant d'appliquer un nouvel appareillage de stomie. Remarque : Au cas o  la stomie s' coule entre les irrigations, utiliser un sac jusqu'  ce que l'irrigation de la colostomie soit bien r gl e. Une fois les habitudes d'irrigation  tablies, un couvre-stomie (non inclus) peut  tre utilis . D brancher et rincer avec de l'eau toutes les pi ces de la trousse d'irrigation. La brosse est uniquement destin e    tre utilis e avec le c ne.

Pour le jeter (Veuillez suivre les r glementations locales en mati re de gestion des d chets)
NE PAS JETER DANS LA TOILETTE

(it) Set di irrigazione per stomia
Contenuto: il prodotto pu� includere uno dei seguenti dispositivi (vedere l'etichetta del prodotto)
Sacca dell'irrigatore con morsetto di regolazione del flusso Cono per stomia con connettore Scovolino per la pulizia Morsetto per sacca per ileostomia Cintura per stomia Adapt™ Lubrificante per stomia Adapt™ 
Sacca di scarico con chiusura con piaattina animata  

Descrizione del prodotto: prodotti per facilitare l'irrigazione della colostomia. La sacca di scarico   progettata per aderire alla cute attorno alla stomia o per essere tenuta in posizione tramite un anello e una cintura per stomia in modo da aiutare a direzionare nel water le deiezioni della stomia. L'irrigatore con il cono per stomia e la cannula sono utilizzati per introdurre l'acqua nella stomia. La chiusura a morsetto pu  essere utilizzata per facilitare la chiusura della sacca di scarico. Lo scovolino per la pulizia viene utilizzato quando si effettua il risciacquo del cono e della cannula. I dispositivi sono realizzati in materiali plastici di polimero/copolimero, silicone e possono contenere metallo.

Indicazioni e utilizzo previsto: questi prodotti sono destinati all'uso per l'irrigazione per colostomia. Si utilizza l'irrigazione per aiutare a regolare lo svuotamento intestinale, quando raccomandato dal personale infermieristico dedicato o da un operatore sanitario.

AVVERTENZE: l'uso di acqua estremamente calda pu  causare lesioni. Le complicanze possono comprendere anche il mancato ritorno del fluido, la risposta vasovagale e i crampi addominali.

Per i prodotti indicati come:

	Non compatibile con la RM. La sicurezza di questo dispositivo � stata testata nell'ambiente di risonanza magnetica (RM). Questo dispositivo � etichettato "Non compatibile con la RM" e non deve essere utilizzato in un ambiente di RM.
---	--

Precauzioni Il kit di irrigazione non   destinato all'uso in caso di urostomia o ileostomia. Si possono verificare lesioni e/o infezioni se i prodotti sono utilizzati in caso di urostomia o ileostomia.

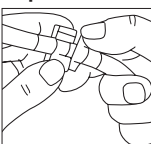
Per i prodotti indicati come:

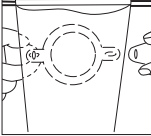
	Singolo paziente - multisio. Sciareacqua con acqua pulita e asciugare con una salvietta, se necessario. Gettare se visibilmente danneggiato o macchiato. Condividere il prodotto con pi� utilizzatori crea rischio di infezione.
---	--

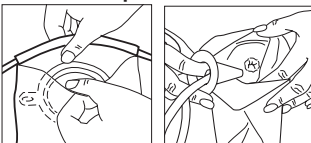
Note: l'irrigazione potrebbe non essere consigliata in presenza di una delle seguenti condizioni: chemioterapia, radioterapia, stenosi della stomia, ernia parastomale di grandi dimensioni, prolasso della stomia, morbo di Crohn o diarrea. Contattare il personale infermieristico dedicato o un operatore sanitario per decidere se l'irrigazione   consigliata nel proprio caso e per ricevere aiuto con il sistema di raccolta per stomia o in caso di irritazione cutanea. In caso di gravi lesioni (incidente) correlate all'uso del prodotto, contattare il proprio distributore locale o il produttore, nonch  l'autorit  competente locale. Per ulteriori informazioni, visitare www.hollister.com/authority o contattare il rappresentante CE o il distributore locale.

	Numero di unit�
	Dispositivo medico (dove applicabile).
Realizzato senza lattice di gomma naturale.	
CE mark come richiesto	

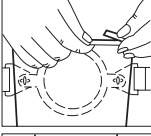
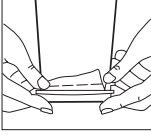
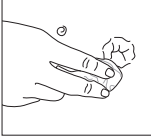
	Numero di unit�
	Dispositivo medico (dove applicabile).

ISTRUZIONI PER L'USO:	
Preparare la sacca dell'irrigatore e il cono	
	Collegare la cannula del cono per stomia al tubo della sacca dell'irrigatore unendoli l'uno con l'altro. Assicurarsi che il regolatore del flusso sia chiuso. Riempire la sacca dell'irrigatore con un volume d'acqua tiepida pari a quanto indicato dall'infermiere stomaterapista o da un operatore sanitario e appendere la sacca all'altezza delle spalle. Aprire il regolatore del flusso per consentire all'acqua di passare attraverso il cono, eliminando l'aria dalla cannula. Chiudere il regolatore del flusso.

Collegare la sacca di scarico	
	Per sistema monopezzo: collegare la cintura per stomia a un lato della sacca di scarico e posizionare l'apertura intorno alla stomia. Avvolgere la cintura per stomia attorno al corpo e collegarla all'altro lato dell'anello, regolandola in modo che si adatti alla perfezione.
	Pour un syst�me 2 pe�ces – Fixer le drain irrigateur � la collerette de votre champ cutan�e.

Introdurre l'acqua nella stomia	
	

Sedersi sul water o su una sedia accanto a esso posizionando l'estremit  della sacca di scarico all'interno del water. Inserire delicatamente il cono per stomia nella stomia attraverso l'apertura superiore della sacca di scarico. L'inserimento del cono per stomia pu  essere facilitato utilizzando dell'acqua o un lubrificante per stomia. Aprire il morsetto sul tubo per consentire all'acqua di fluire alla velocit  desiderata. Chiudere il morsetto quando una quantit  d'acqua sufficiente   penetrata nel colon. In caso di crampi addominali, rallentare o fermare temporaneamente il flusso.

	Rimuovere il cono dalla stomia e chiudere la parte superiore della sacca di scarico arrotondando la chiusura verso il basso e piegandone il lato.
	Se si desidera allontanarsi dal water, applicare il morsetto per sacca sulla parte inferiore della sacca di scarico. Attendere durante lo svuotamento del colon. Di solito sono necessari 30-45 minuti, ma i tempi possono dipendere dalla frequenza di irrigazione.
	

Svuotare la sacca per irrigazione. Rimuovere la sacca di scarico e pulire attorno alla stomia e la cute peristomale e asciugare tamponando prima di applicare un nuovo sistema di raccolta. Nota: Fintantoch  l'irrigazione per colostomia non diventa regolare,   necessario applicare una sacca nel caso in cui la stomia funzioni tra un'irrigazione e l'altra. Una volta stabilita la regolarit  dell'irrigazione, pu  essere indossato un mini-cap per stomia (non incluso). Scollegare e pulire tutte le componenti per l'irrigazione con dell'acqua. Lo scovolino deve essere utilizzato solo sul cono.

Come smaltire (Attenersi a tutte le normative locali in tema di smaltimento)
NON GETTARE NEL WC

(nl) Stoma-irrigatieset
Inhoud: Uw product kan een of meer van de volgende onderdelen bevatten (zie productlabel)
Irrigatiezak met regelklep Stomaconus met connector Reinigingsborstel Afsluitklep voor open stoma-opvangzakje Adapt™-stomagordel Adapt™-stomaglijmiddel 
Irrigatiesleeve met wikkelsluiting  

Productbeschrijving: Producten ter ondersteuning van uw irrigatie. De irrigatiesleeve is ontworpen om op de huid rondom de stoma te worden geplakt of om op zijn plaats te worden gehouden met een ring en stomagordel om de stoma-uitscheiding naar het toilet te leiden. De irrigator met stomaconus en slang wordt gebruikt om water in de stoma te laten stromen. De afsluitklep kan worden gebruikt om de irrigatiesleeve te sluiten. De reinigingsborstel wordt gebruikt bij het spoelen van de conus en slang. Gemaakt van polymeren/copolymeren, siliconen en kan metaal bevatten.

Indicaties en beoogd gebruik: Deze producten zijn bedoeld voor gebruik bij stoma-irrigatie. Irrigatie wordt gebruikt om het ledigen van de darm te reguleren indien dit wordt aanbevolen door een stoma-verpleegkundige of zorgverlener.

WAARSCHUWINGEN: Het gebruik van zeer heet water kan letsel veroorzaken. Complicaties kunnen ook het niet terugstromen van vloeistof, vasovagale respons en buikkrampen zijn.

Voor producten aangeduid als:

	MRI-onveilig. De veiligheid van dit hulpmiddel is getest in de MRI-omgeving. Dit hulpmiddel is gelabeld als MRI-onveilig en mag niet worden gebruikt in MRI-omgevingen.
---	---

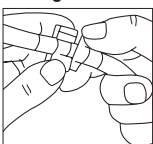
Voorzorgsmaatregelen De irrigatieset is niet bedoeld voor gebruik bij een urostoma of ileostoma. Als de producten worden gebruikt bij een urostoma of ileostoma, kan dit leiden tot letsel en/of infectie.
Voor producten aangeduid als:

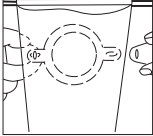
	Enkele pati�nt – meerdere malen te gebruiken. Met schoon water spoelen, afdrogen naar behoefte. Bij zichtbare beschadiging of vlekken wegwerpen. Als het product door meerdere personen wordt gebruikt kan dat infectierisico's opleveren.
---	--

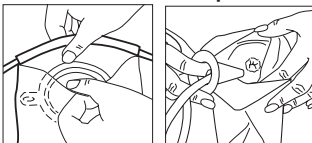
Opmerkingen: Irrigatie wordt mogelijk niet aanbevolen als u een van de volgende aandoeningen heeft: stomatenose, grote parastomale hernia, stomaprolaps, ziekte van Crohn, diarree of als u momenteel chemotherapie of bestraling ondergaat. Neem contact op met een stomaverpleegkundige of zorgverlener om te beslissen of irrigatie geschikt voor u is of als u hulp nodig heeft met het stomaopvangsysteem of huidirritatie. In het geval dat er ernstig letsel (incident) optreedt met betrekking tot het gebruik van het product, neem dan contact op met uw lokale distributeur of fabrikant en uw lokale bevoegde instantie. Voor meer informatie kunt u naar www.hollister.com/authority gaan of contact opnemen met de vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap (EC) of met de lokale distributeur.

	Aantal in verpakking
	Medisch hulpmiddel (waar van toepassing).
Niet vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex.	
CE-keurmerk zoals vereist	

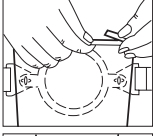
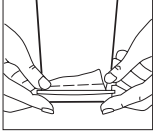
	Aantal enhet�r
	Medicinteknisk produkt (som till�mpligt).

GEbruiksaanwijzing:	
De irrigatiezak en conus voorbereiden	
	Sluit de slang van de stomaconus aan op de slang van de irrigatiezak door ze tegen elkaar te drukken. Zorg ervoor dat de regelklep gesloten is. Vul de irrigatiezak met de hoeveelheid lauwwarm water zoals aangegeven door uw stomaverpleegkundige of zorgverlener en hang de zak op schouderhoogte. Open de regelklep om water door de conus te laten stromen en zo lucht uit de slang te verwijderen. Sluit de regelklep.

De irrigatiesleeve bevestigen	
	Eendelig systeem: bevestig de stomagordel aan ��n kant van de irrigatiesleeve en plaats de opening rond de stoma. Wikkel de stomagordel om het lichaam en bevestig hem aan de andere kant van de ring, stel de gordel zo af dat hij goed aansluit.
	Tweedelig systeem: bevestig de irrigatiesleeve aan de flens van uw huidplak.

Water in de stoma laten lopen	
	

Ga op het toilet of op een stoel naast het toilet zitten en plaats het uiteinde van de irrigatiesleeve in de toiletpot. Plaats de stomaconus voorzichtig in de stoma via de bovenste opening van de irrigatiesleeve. Het inbrengen van de stomaconus kan gemakkelijk worden met water of een stomaglijmiddel. Open de regelklep om de slang om het water met de gewenste snelheid te laten stromen. Sluit de regelklep wanneer er voldoende water in uw dikke darm zit. Als u buikkrampen krijgt, dient u de vloeistofstroom tijdelijk te vertragen of te stoppen.

	Verwijder de conus uit de stoma en sluit de bovenkant van de irrigatiesleeve door de sluiting omhoog te rollen en de zijkant van de sluiting om te buigen.
	Bevestig de afsluitklep van het opvangzakje aan de onderkant van de irrigatiesleeve als u het toilet wilt verlaten. W