	Größe	Länge	Spitze	Farbe des Trichters	Bestell- Nr.	Pharma-Z D	entral-Nr. CH	Packungs- inhalt
VaPro	8 Ch	20 cm	Nelaton	•	72082 (1)	13751251	6063504	25
Berührungsfreier hydrophiler	10 Ch	20 cm	Nelaton		72102 (1)	13751127	4011880	25
Einmalkatheter	12 Ch	20 cm	Nelaton	0	72122 (1)	13751156	4011905	25
Elimanatiotol	14 Ch	20 cm	Nelaton		72142 (1)	13751179	4011911	25
	8 Ch	40 cm	Nelaton		72084 (1)	13751245	6063510	25
	10 Ch	40 cm	Nelaton	•	72104 (1)	13751133	4011756	25
	12 Ch	40 cm	Nelaton	0	72124 (1)	13751162	4011762	25
D: HMV: (1)15.25.14.7036	14 Ch	40 cm	Nelaton		72144 (1)	13751185	4011779	25
D: HMV: (2)15.25.14.7037	16 Ch	40 cm	Nelaton		72164 (1)	13751191	5433287	25
CH: MiGeL: 15.10.02.01.1L eCl@ss 10.0.: 34-25-01-08	12 Ch	40 cm	Tiemann	0	73124 (2)	13751216	5502462	25
eul@55 10.0 54-25-01-00	14 Ch	40 cm	Tiemann	•	73144 (2)	13751222	5502479	25
	16 Ch	40 cm	Tiemann		73164 (2)	13751239	5502485	25
	8 Ch	40 cm	Nelaton		7600084	13654909	7127382	25
VaPro F-Style	10 Ch	40 cm	Nelaton		7600084	13654915	7127302	25
Berührungsfreier hydrophiler Einmalkatheter	12 Ch	40 cm	Nelaton	0	7600104	13654921	7127407	25
mit festerem Kathetermaterial	14 Ch	40 cm	Nelaton		7600124	13654938	7127413	25
	16 Ch	40 cm	Nelaton		7600164	13654944	7127436	25
D: HMV: 15.25.14.7091 CH: MiGeL: 15.10.02.01.1L eCl@ss 10.0.: 34-25-01-08								
VaPro Plus	12 Ch	20 cm	Nelaton	0	74122	13751268	5269511	25
Berührungsfreier hydrophiler Einmalkatheter	14 Ch	20 cm	Nelaton	•	74142	13751280	5269528	25
mit Auffanghautal	12 Ch	40 cm	Nelaton	0	74124	13751274	5269534	25
& Warro Plus	14 Ch	40 cm	Nelaton		74124	13751274	5269540	25
D: HMV: 15.25.14.9032 CH: MiGeL: 15.10.03.01.1L eCl@ss 10.0.: 34-25-01-10								
VaPro Plus F-Style	12 Ch	40 cm	Nelaton	0	7700124	13895843	7127442	25
Berührungsfreier hydrophiler Einmalkatheter mit festerem Kathetermaterial und Auffangbeutel  D: HMV: 15.25.14.9052 CH: MiGeL: 6CI@ss 10.0.: 34-25-01-10	14 Ch	40 cm	Nelaton	•	7700144	13895866	7127459	25
VoDro Booket	10 Ch	20 cm	Nelaton	•	70102	13751423	6109152	25
VaPro Pocket	12 Ch	20 cm	Nelaton	0	70122	13751446	6109169	25
Berührungsfreier hydrophiler Einmalkatheter im Pocketformat	14 Ch	20 cm	Nelaton	•	70142	13751452	6109175	25
IIII OCKCHOITIAL	10 Ch	40 cm	Nelaton	•	70104	13751481	6161974	25
, pro	12 Ch	40 cm	Nelaton		70124	13751469	5943309	25
	14 Ch	40 cm	Nelaton		70144	13751475	5943315	25
0	16 Ch	40 cm	Nelaton		70164	13751498	6161980	25
D: HMV: 15.25.14.7072 CH: MiGeL: 15.10.02.01.1L eCl@ss 10.0.: 34-25-01-08								
VaPro Plus Pocket	8 Ch	20 cm	Nelaton		71082	13751305	6482218	25
Berührungsfreier hydrophiler	10 Ch	20 cm	Nelaton	•	71102	13751311	6482224	25
Einmalkatheter mit Auffang-	12 Ch	20 cm	Nelaton	0	71122	13751328	6482230	25
beutel im Pocketformat	14 Ch	20 cm	Nelaton	•	71142	13751334	6482247	25
	8 Ch	40 cm	Nelaton		71084	13751363	6464901	25
	10 Ch	40 cm	Nelaton		71104	13751386	6464918	25
	10 011	40 0111	Notaton		71107	13/3/300	0404310	20
D: HMV: 15.25.14.9049	10 Ch	40 cm	Nelaton	0	71124	13751392	6464924	25
D: HMV: 15.25.14.9049 CH: MiGeL: 15.10.02.01.1L eCl@ss 10.0.: 34-25-01-10								



Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter www.facebook.com/HollisterDeutschland und werden Sie Fan!

Achtung: Um das Infektionsrisiko und/oder das Risiko anderer Komplikationen zu minimieren, darf derselbe Katheter nicht mehrmals verwendet werden. Entsorgen Sie den Katheter nach dessen Gebrauch. Sollten Schmerzen oder Beschwerden beim Gebrauch auftreten, fahren Sie mit der Benutzung nicht fort und suchen Sie umgehend einen medizinischen Ansprechpartner auf.

Bitte suchen Sie Ihren Arzt vor Verwendung des Produktes auf, wenn bei Ihnen eine der folgenden Erkrankungen vorliegt: Urethraruptur, unerklärliche Harnröhrenblutungen, Harnröhrenverengungen, Urethritis (Entzündung der Harnröhre), Prostatiis (Entzündung der Prostata), Epididymitis (Entzündung der Samenleiter). Intermittierende Selbstkatheterisierung sollte nur nach ärztlicher Anordnung und unter Beachtung der Anwendungshinweise erfolgen. Befolgen Sie stets die Vorgaben Ihres Arztes oder Ihres medizinischen Ansprechpartners. Intermittierende Selbstkatheterisierung (ISK) wird üblicherweise mindestens viermal in Abständen von 6–8 Stunden durchgeführt. Sollten Sie Fragen zur Katheterisierung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihren medizinischen Ansprechpartner.

Hinweis: Lagern Sie die Katheterboxen bitte in horizontaler Lage und bei normaler Raumtemperatur. Nicht verfügbar in den Vereinigten Staaten.

Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–16.00 Uhr E-Mail: beratungsteam@hollister.com

Mo.–Do.: 8.00–12.00 Uhr, 13.30–17.00 Uhr Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.30–16.00 Uhr E-Mail: info@hollister.ch













#### VaPro-Produktfamilie

Berührungsfreie hydrophile Einmalkatheter

## Die perfekte Lösung

**Bei Hollister Kontinenzversorgung steht der Mensch im Mittelpunkt.** Wir verstehen unsere Aufgabe darin, einen Beitrag zu erhöhter Lebensqualität zu leisten. Alles, was wir tun, folgt unserem Leitsatz: **People First.** 

## Die hydrophilen Einmalkatheter der VaPro-Produktfamilie ...

... überzeugen durch Sicherheit und einfache Handhabung. Mit ihren durchdachten Produkteigenschaften helfen sie, die Lebensqualität von Betroffenen zu steigern. Sie sind leicht zu öffnen und ohne weitere Vorbereitungen sofort einsatzbereit. Dank der sterilen Folienumhüllung ist die Anwendung berührungsfrei. So bleiben die Katheter vor der Kontamination mit Bakterien geschützt. Die Produkte der VaPro Pocket Familie bestechen zusätzlich mit einer diskreten und zugleich platzsparenden Verpackung sowie einer kleinen Box mit zwei praktischen Entnahmemöglichkeiten.



VaPro F-Style und VaPro Plus F-Style Einmalkatheter

Ein weiterer Grund,
VaPro zu wählen.
Der VaPro F-Style ist ein
Einmalkatheter aus festerem
Kathetermaterial für noch
mehr Kontrolle beim
Einführen.

VaPro F-Style



## Beschichtungstechnologie mit Wasserdampf

Die Katheter der VaPro-Produktlinie funktionieren mit der innovativen Wasserdampftechnologie, sodass diese beim Öffnen der Verpackung bereits hydriert sind. Eine Zugabe von Wasser ist nicht erforderlich. Das steckt dahinter: In der Verpackung befinden sich sterile Wasserdampfmoleküle. Diese aktivieren die hydrophile Beschichtung des Katheters und sorgen für seine Gleitfähigkeit und sofortige Gebrauchsfertigkeit, noch während der Katheter in der Verpackung ist.

### Verschiedene Optionen für verschiedene Lebenslagen

Die VaPro Produktlinie bietet dem Anwender eine breite Auswahl an Optionen:

- Weicheres und festeres Kathetermaterial ("F-Style" steht für einen festeren Katheterkörper)
- Katheter mit und ohne Beutel ("Plus" steht für einen Katheter mit integriertem Auffangbeutel)
- Standard- und platzsparende Verpackung ("Pocket" steht für eine besonders diskrete Verpackung)



Hans Peter Thomas lebt in Günzburg und hat einen Zweitwohnsitz in der Türkei. Seine Familie und sein großer Freundeskreis sind für ihn Kraftquelle und Inspiration. Auch wenn er sich manchmal wünscht, wieder die Kontrolle über seine Beine zu haben, lässt er Verbitterung und Groll keinen Platz in seinem Leben. Diese positive Haltung teilt er in seiner ehrenamtlichen Arbeit mit anderen. Hans Peter engagiert sich in der Betreuung von Querschnittgelähmten und hilft ihnen mit seinem großen Erfahrungsschatz.




# **People First:**Jana Schulz, Greifswald, Deutschland


Das Wort "Energiebündel" muss für Jana erfunden worden sein. Die 45jährige Frau, die seit fast 20 Jahren mit der Diagnose MS lebt, sprüht geradezu vor Lebensfreude und Fröhlichkeit. Eigenschaften, die für ihre Arbeit perfekt sind. Denn die Greifswalderin leitet in ihrer Heimatstadt das Haus der Begegnung – eine Einrichtung, die 30 Selbsthilfegruppen, Verbände und Vereine für Menschen mit Handicap unter einem Dach versammelt. Eine außergewöhnliche Begegnungsstätte, die einzigartig in Deutschland ist. Mindestens genauso einzigartig ist die Vorsitzende dieses Hauses.

## So lässt sich die patentierte Verpackung ganz einfach öffnen:

- Stecken Sie Ihre Zeigefinger etwa bis zur Hälfte durch die vorgestanzten Fingerlöcher. Die Verpackung sollte dabei mit der Vorderseite zu Ihnen gerichtet sein.
- Ziehen Sie die Verpackung mit leichtem Zug entlang des markierten Pfeils, so weit Sie möchten, nach unten auf.




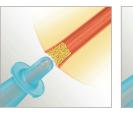

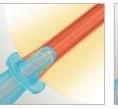



In der Harnröhre können sich überwiegend in den vorderen 15 mm viele Keime und Bakterien befinden. Die bewährte Schutzhülse überbrückt diesen Bereich und hilft so, den Katheter vor direktem Kontakt zu schützen. Der Katheter kommt erst nach dieser kritischen Zone von 15 mm mit der Harnröhre in Kontakt. Das Risiko eines Bakterientransfers in die Harnblase wird dadurch gesenkt.

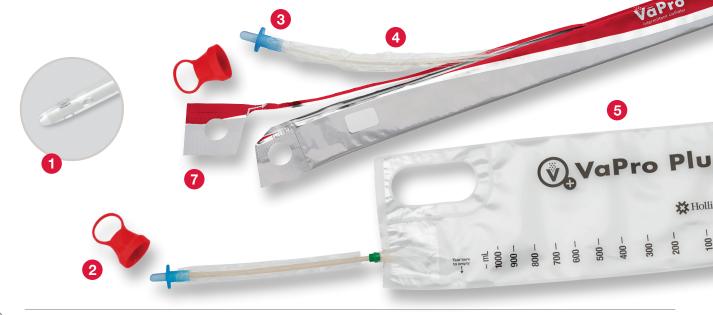

- Sanfte Katheteraugen sorgen für eine sanfte und sichere Anwendung und helfen, das Risiko traumatischer Verletzungen der Harnröhre beim Einführen und Entfernen des Katheters zu reduzieren.
- 2 Sterilschutzkappe hilft, die Sterilität der Katheterspitze nach dem Öffnen der Verpackung aufrechtzuerhalten. Die Ringkappe gewährleistet ein einfaches Abnehmen.
- 3 Schutzhülse, um den Katheter vor Kontakt mit Keimen und Bakterien im Eingangsbereich der Harnröhre zu bewahren. Die Schutzhülse hilft dabei, das Risiko eines Bakterientransfers in die Blase zu reduzieren.
- 4 Sterile Folienumhüllung ermöglicht eine berührungsfreie und sichere Anwendung, weil der Katheter vor Kontamination mit Keimen geschützt wird.
- Auffangbeutel der integrierte Auffangbeutel bei VaPro Plus und VaPro F-Style Plus hat ein Fassungsvermögen von 1.000 ml und ermöglicht eine diskrete und sichere Entleerung der Harnblase sowohl zu Hause als auch unterwegs. Die integrierte Rücklaufsperre verhindert ein Zurückfließen des Urins und beugt Infektionen vor.
- VaPro und VaPro Plus im Pocket Format mit Auffangbeutel weniger Umfang und doch ein Katheter in voller Länge, der dank seiner kompakten Verpackung spielend in eine Tasche oder einen Rucksack passt. Aufbewahrt wird der VaPro Plus Pocket in einer platzsparenden Box mit praktischer Entnahmemöglichkeit.
- 7 Einfache Handhabung einfach zu öffnende Verpackung, auch für Anwender mit eingeschränkter Handfunktion.
- 8 Die Rücklaufsperre verhindert den Rückfluss des Urins über den Katheter und beugt Infektionen vor (VaPro Plus/VaPro Plus F-Style/VaPro Plus Pocket).